

Manual do Usuário

Usuários que não possuem acesso ao sistema poderão apenas visualizar as informações adicionadas pelos administradores do site, ou seja, apenas visualizar os arquivos presentes no *Atlas Radiográfico*, e utilizar das ferramentas que ajudam na visualização como ajuste de nitidez e brilho. O usuário poderá acessar da seguinte forma:



Ao clicar em qualquer uma dessas opções, irá para uma tela de listagem para o tipo de animal especificado: canino, felino, cateto, cutia ou mocó. Lá terão os arquivos já adicionados pelos usuários administradores do sistema.




Na tela de listagem existem as seguintes interações:


1. Digitar algo para pesquisar por nome.
2. Clicar em ID, Nome, Local, Data de Armazenamento ou Quantidade de Imagens para organizar a lista presente na ordem desejada, seja crescente ou decrescente.

3. Abrir informações mais detalhadas da imagem (Capa, Nome do Paciente, Descrição). Detalhe na próxima figura.


4. Exibir mais arquivos na listagem sem precisar passar de página, podendo exibir até 20 de uma vez.

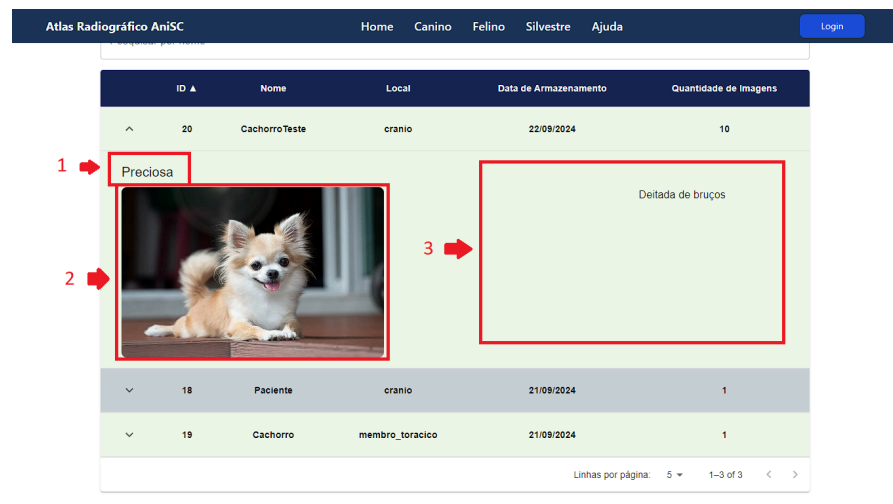

Ao clicar irá abrir essas informações: a primeira sendo o nome do paciente, a segunda a capa escolhida para detalhar o posicionamento do paciente, e a terceira para ter mais informações. A tela listagem para o usuário administrador não tem muita diferença, só tem a possibilidade de editar ou deletar os arquivos adicionados, ou adicionar um novo arquivo na janela editar (explicada mais à frente):

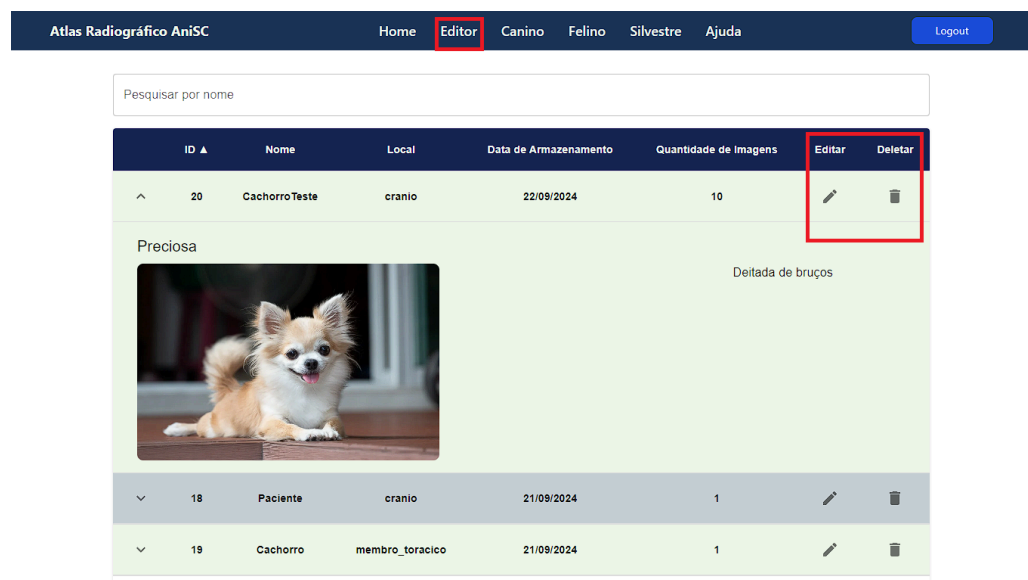

Mais para frente irá ser explicado a tela de edição. Mas ao clicar em deletar aparece isso:

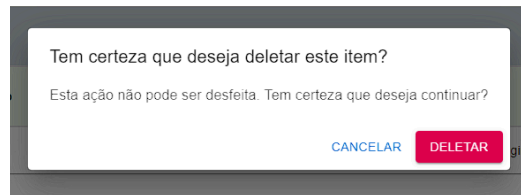


E ao aceitar a exclusão, a página irá reiniciar.

Ao clicar no nome do arquivo irá para a página de visualização. E essa será a tela para qualquer usuário do sistema:



Ocorrerá o seguinte ao interagir com qualquer uma das coisas:

1. Irá exibir a capa adicionada no sistema pelo administrador. Ao clicar novamente a imagem some. Pode movimentar ou aumentar o tamanho da imagem como bem quiser para melhor visualização.

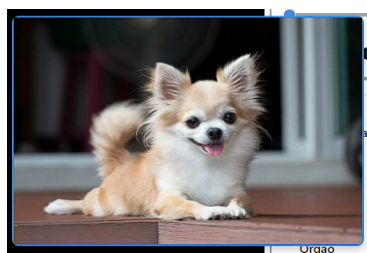

2. Irá restaurar a imagem ao que estava anteriormente a aplicar brilho e nitidez (ponto 5).

3. Aqui é onde a radiografia está sendo exibida com as anotações adicionadas. Pode utilizar a “rodinha” do mouse para passar para a próxima ou voltar para a anterior.

4. Exibir as informações da radiografia feita (nome do paciente, data que foi feita e descrição).




A screenshot of a web application modal window titled "Informações". The modal has a white background and a thin border. It contains three lines of text: "Nome do Paciente: Preciosa", "Data do Exame: 02/03/2001", and "Descrição: Deitada de bruços". In the bottom right corner, there is a blue button labeled "FECHAR".

Informações	
Nome do Paciente:	Preciosa
Data do Exame:	02/03/2001
Descrição:	Deitada de bruços

FECHAR

5. Filtros de Brilho e Nitidez para as imagens radiográficas.
6. Visualizar ou não algum dos tipos de anotações (podendo diferenciar pelas cores).
7. Visualização visual da quantidade de imagens presentes nesta radiografia, mostrando a imagem que está atualmente.

A seguir temos a tela de login de usuário, onde os administradores entram para administrar o site:

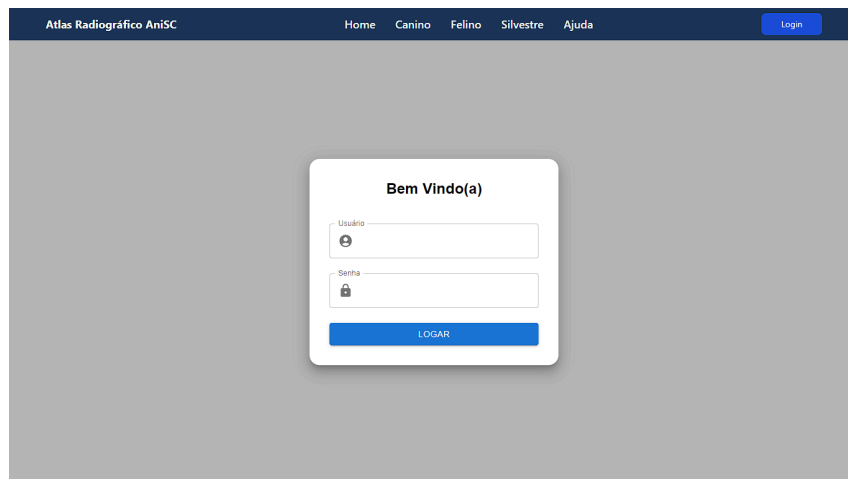

A screenshot of a web application login page. The page has a dark blue header with the text "Atlas Radiográfico AniSC" and navigation links: "Home", "Canino", "Felino", "Silvestre", "Ajuda", and a "Login" button. The main content area is gray and features a white login form titled "Bem Vindo(a)". The form has two input fields: "Usuário" with a person icon and "Senha" with a lock icon. Below the fields is a blue button labeled "LOGAR".

Atlas Radiográfico AniSC Home Canino Felino Silvestre Ajuda Login

Bem Vindo(a)


Usuário

Senha

LOGAR

Editor

A seguir temos a explicação da janela Editor, que é onde ocorre a adição de novos arquivos no sistema:

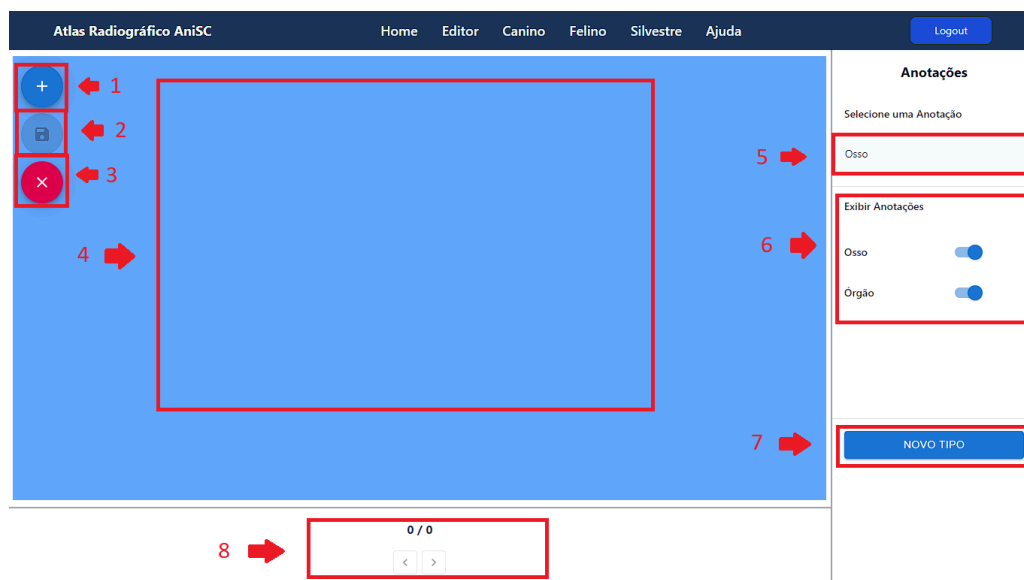


1. Adicionar as imagens da radiografia. **DETALHE IMPORTANTE:** quando for adicionar as imagens se certifique que são imagens dicom (.dcm) retiradas diretamente de uma máquina de radiografia. Conversões podem não ser aceitas. E quando for adicionar mais de uma, se certifique de selecionar todas as imagens da mesma radiografia juntas (selecionando mais de uma de uma vez). **NÃO** será possível adicionar novas imagens na edição do arquivo, e caso troque de imagem enquanto está colocando anotações, as anotações serão reiniciadas.

2. Botão de salvar que só será habilitado quando adicionar alguma imagem válida.

3. Botão de cancelar, irá voltar para a página home.

4. Local onde as imagens adicionadas podem ser vistas. Ao utilizar a “rodinha” do mouse, e tiver mais de uma imagem, poderá se locomover entre elas. Ao clicar no botão direito do mouse poderá adicionar o tipo de anotação selecionada no ponto 5.

5. Anotações para selecionar.

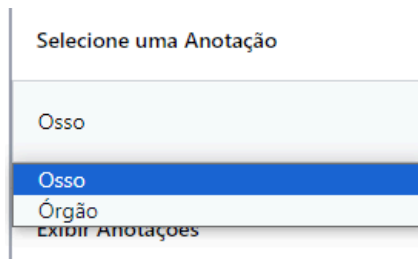


6. Local onde teremos a visualização das anotações. Caso queira elas são visíveis ou não durante o processo de adicionar.

7. Ao clicar irá adicionar um novo tipo de anotação. Podendo escolher o nome da nova anotação e a cor que ela terá.

DETALHE: só é possível adicionar anotações distintas uma da outra, ou seja, nomes diferentes. Ainda é possível colocar Osso1 ou Osso2 (apesar da compreensão poder ficar estranha para quem for visualizar então tente evitar), mas Osso não é possível por já existir esse tipo de anotação. Caso tente irá exibir um erro:

Ao escolher um tipo que realmente é possível, tornar a anotação usável no arquivo:

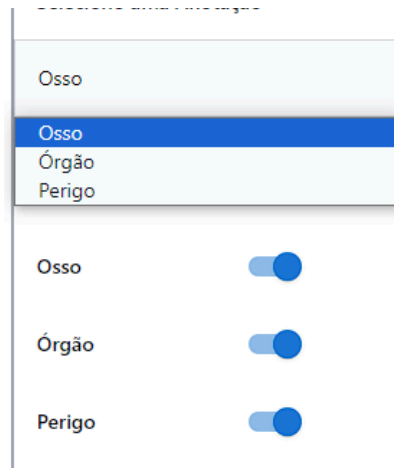


8. Local onde será visto a imagem atual e a quantidade de imagens presente no arquivo.


Um arquivo sendo adicionado com todas essas edições:




Agora será possível clicar no botão de salvar falado anteriormente irá aparecer a seguinte tela:

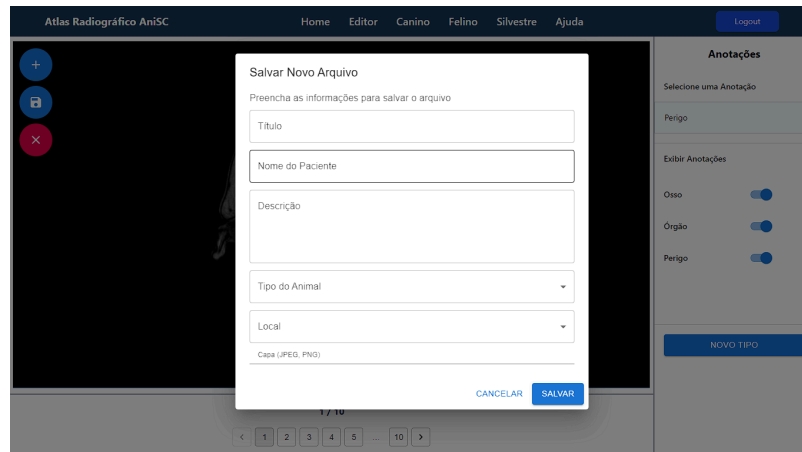


Um detalhe é que todos os campos são obrigatórios, e caso não adicionado algo aparece os seguintes erros:

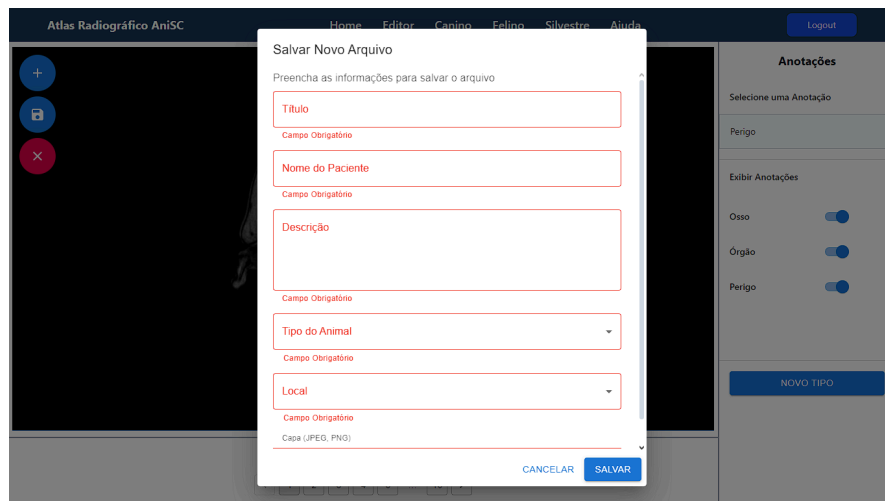

E mais um detalhe. Caso adicione um título já existente também ocorrerá um erro:

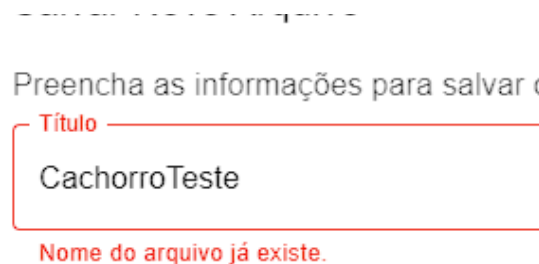

Ao preencher corretamente os itens irá aparecer a tela de salvamento (não sair da tela para não correr o risco de salvar errado). E ao terminar de salvar irá aparecer o seguinte aviso no canto inferior esquerdo da tela antes da página ser reiniciada:

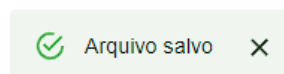

E como podemos ver temos um novo cachorro adicionado:

▼	21	Cachorro-Manual	cranio	22/09/2024
---	----	-----------------	--------	------------

A tela de edição de um arquivo existente não possui muita diferenças não:



Na verdade, a única diferença é que não é possível adicionar novas imagens, como dito anteriormente. E ao clicar em salvar alterações, aparecem as informações já existentes, podendo ou não alterar a capa:

Editar Arquivo

Edite as informações do arquivo

Título

Cachorro-Manual

Nome do Paciente

Preciosa

Descrição

Deitada

Tipo do Animal

Canino

Local

Crânio

Capa (JPEG, PNG)

CANCELAR

ATUALIZAR

FIM